

Patch Anti-Douleur (Icwave)

Soulagement naturel de la douleur sans aucun risque pour votre organisme.



Selon la théorie de l'acupuncture, la douleur est le résultat d'une obstruction d'un flux d'énergie circulant dans l'organisme. La technologie Lifewave rééquilibre ce flux, assurant le fonctionnement correct de tous les systèmes de l'organisme et commençant ainsi le processus de soulagement de la douleur.

Comment fonctionnent les Patchs Icwave ?

⇒ Le patch Icwave a pour principal objectif de soulager naturellement certaines douleurs et diminuer l'inconfort en relançant le flux énergétique dans le corps

Les patchs utilisent le champ électromagnétique et les points d'acupuncture pour faire réagir le corps par lui-même.

Les patchs non-transdermiques, parfaitement scellés, contiennent une solution cristallisée d'acides aminés, d'eau, de sucre et d'oxygène. Cette solution est spécifique à chacun des patchs Lifewave en fonction de l'action recherchée.

En fonction de la fréquence émise par chacun des différents patchs, le corps réagira différemment et produira des effets spécifiques : mieux dormir, soulager la douleur, améliorer les performances, lutter contre les effets du vieillissement...

⇒ Aucun produit,
⇒ Aucune substance,
⇒ Aucun médicament.



**RIEN NE PENETRE
DANS LE CORPS**

Comment utiliser les Patchs Icwave ?

Voici le mode d'emploi des Patchs Icwave :

La « méthode de l'horloge » pour le placement des patchs IceWave a été mise au point pour

procurer le soulagement de la douleur le plus rapide et le plus efficace. Commencez par situer la zone la plus douloureuse. Suivez les étapes ci-dessous jusqu'à une réduction importante de la douleur et/ou une augmentation de la mobilité. Si vous souffrez d'une douleur générale affectant tout le corps, placez le patch au point Rein 1

Douleurs ciblées à un endroit précis			
	Etape 1 : Placez un patch Icewave beige directement sur le point où vous éprouvez la douleur la plus forte		Etape 4 : Déplacez ensuite le patch blanc sur la position 6 heures. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.
	Etape 2 : Déplacez le patch blanc au dessus de la douleur. si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.		Etape 5 : Ensuite, déplacez le patch blanc sur la position 9 heures. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.
	Etape 3 : Déplacez le patch blanc sur la position 3 heures. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, passez à l'étape suivante.		Etape 6 : Enfin, placez le patch blanc dans une position parallèle au patch beige. Si la douleur n'a pas diminué après 10 secondes, suivez les instructions ci-dessous.
Douleurs diffuses dans tout le corps			
Rein 1 	Coeur 3 	Placez un patch blanc sur la plante du pied droit et un patch beige sur la plante du pied gauche (Rein1). Vous pouvez appliquer une deuxième paire de patches sur les coudes au (Coeur 3).	

AVERTISSEMENTS : Retirer immédiatement en cas d'inconfort ou d'irritation de la peau. Réservé à l'usage externe. Ne pas ingérer. Ne pas utiliser sur des blessures ou une peau abîmée. Demander l'avis d'un professionnel de la santé avant d'utiliser les patches en cas de problème de santé. Ne pas utiliser les patches pendant la grossesse ou l'allaitement. Ce produit n'est pas indiqué pour le diagnostic, le traitement, la guérison ou la prévention d'aucune maladie. *Les résultats varient en fonction des individus.

Quels sont les bienfaits du Patch Anti-Douleur :


- ➡ Soulagement naturel de la douleur sans aucun risque pour votre organisme
- ➡ Utilisable pour soulager une douleur affectant tout le corps ou une douleur locale

- ➔ Pratique et facile d'utilisation
- ➔ Résultats rapides selon le type et l'ancienneté de la douleur

Des études cliniques montrent les résultats produits par Icewave :

Comment savoir si nos patches Icewave fonctionnent réellement ? Des essais cliniques utilisant une caméra infrarouge ont montré qu'Icewave crée un effet de refroidissement immédiat sur la peau. Icewave offre des résultats rapides et efficaces !

Regardez les photos « avant » et « après » ci-dessous et observez la réduction des « points chauds ». Cet effet thermique localisé signifie que la chaleur est concentrée sur une zone blessée ; il s'ensuit une diminution de la douleur et le rétablissement de l'amplitude de mouvement au site blessé.

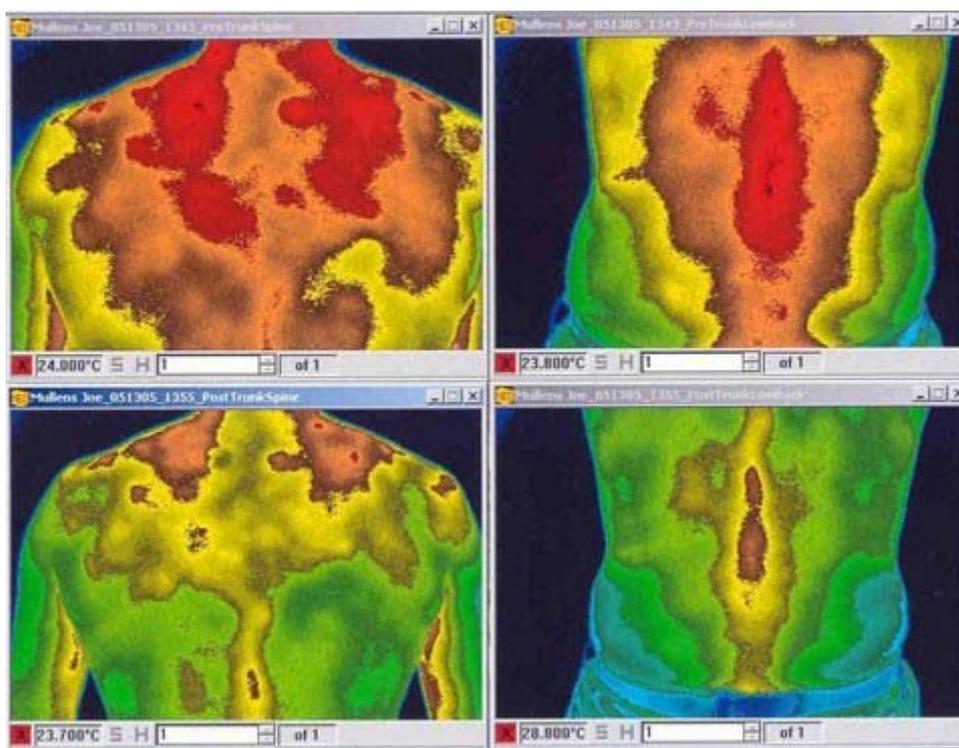

Les deux photos infrarouges ci-dessus mettent en évidence les zones d'inflammation au cou, aux épaules et au bas du dos. Dans les 5 minutes qui suivent l'application des patches anti-douleur LifeWave, on constate une baisse sensible de la température et de l'inflammation.

Ces photos ont été prises dans le cadre d'une étude contrôlée avec placebo en double aveugle. Sur 36 personnes, 34 ont réagi comme indiqué plus haut aux patches IceWave.

Contenu du paquet :

30 Patches (15 blancs positif et 15 marrons négatif) pour 15 applications.

Quelques conseils d'utilisation :

- ➔ Buvez un grand verre d'eau 15 à 20 minutes avant d'appliquer les patches Icewave
- ➔ Appliquer les patches sur une peau propre et sèche
- ➔ Les patches peuvent être portés 16 heures d'affilée (selon besoin, éventuellement tous les jours)
- ➔ N'utiliser qu'une seule paire de ces mêmes patches à la fois



- ➔ Conserver le produit dans un endroit sec, frais et à l'abri du soleil et de la proximité d'un animal, un enfant ou votre corps (ex : dans votre sac en bandoulière)
- ➔ Pour s'assurer le meilleur effet des patches, il est impératif de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, ceci tout au long de la journée et non en deux ou trois fois.

On a tous l'idée préconçue qu'on doit absorber quelque chose (des vitamines, par exemple) pour améliorer sa santé.

Une bonne alimentation, une consommation d'eau suffisante et l'exercice physique sont essentiels à un mode de vie sain, mais notre organisme nécessite également un flux continu d'énergie.

Par exemple, le cerveau et les nerfs transmettent des signaux électriques aux muscles pour qu'ils exploitent l'énergie chimique en réserve afin de se contracter.

On sait depuis des milliers d'années que certaines fréquences lumineuses peuvent provoquer des changements particuliers dans le corps humain.

Lors des expositions au soleil, une fréquence lumineuse déclenche la production de vitamine D par l'organisme.

Une autre fréquence lumineuse (UV) déclenche la production de mélanine (l'agent chimique qui permet à la peau de bronzer).

Les patches IceWave exploitent ces connaissances pour stimuler les points d'acupuncture sur le corps afin d'améliorer le flux d'énergie et soulager la douleur.

(Source du site officiel Lifewave : <http://www.lifewave.com/french/icewave.asp>)